

## Элегантное кресло нулевой гравитации uDream

### Функции

1. Новое уникально 3D массажное кресло может массировать не только спину, но и шею. Массажное кресло производит роликовый, разминающий, постукивающий и точечный массаж и более 10 различных комбинаций этих видов массажа. Функция регулировки массажера для ног позволяет использовать массажное кресло людям разного роста.
2. Позиция нулевой гравитации. В этой позе тело человека расположено таким образом, что все мышцы максимально расслабляются. Сон и отдых в позе нулевой гравитации самый глубокий и эффективный.
3. Массаж рук – важное преимущество массажного кресла. Уникальность uDream в том, что вся рука массируется одновременно: от плеч до кончиков пальцев.
4. Антицеллюлитный массаж бедер. В кресле uDream возможен антицеллюлитный массаж бедер. Вы сможете отрегулировать интенсивность массажа и настроить его именно под Ваши потребности благодаря большому количеству разнообразных режимов.
5. Функция разработки голеностопных суставов. Эта опция особенно будет полезна пожилым людям и тем, кто много времени проводит на ногах. Своевременная профилактическая работа с суставами является залогом здоровья даже в пожилом возрасте.
6. Воздушно - компрессионный массаж ног позволит Вам решать такие проблемы как: усталость и тяжесть в ногах, отеки, сосудистые звездочки, дряблая кожа. Многочисленные воздушные подушки сжимают ноги, стимулируя кровообращение и разминая мышцы.

**NEW!!!** Воздушно-компрессионный массаж всего тела. Это новая опция, благодаря которой глубокий, но мягкий массаж смогут получить все те, кому противопоказан роликовый массаж: пожилые люди, люди после травм и болезней. Большое количество воздушных подушек позволяют воспроизводить вытягивающие и скручивающие движения.

## Делай свою жизнь здоровой и красивой каждый день!

### **Примечание:**

Мы оставляем за собой право на модификацию дизайна и дополнения к описанию наших продуктов. Изменения могут производиться без предварительного уведомления, это касается цвета и комплектующих изделия.

***Благодарим Вас за покупку кресла нулевой гравитации uDream!***

***Перед использованием массажного кресла, пожалуйста, прочтите инструкцию по применению. После прочтения, сохраняйте инструкцию в хорошем состоянии для возможного обращения к ней в случае необходимости. Особое внимание обратите на раздел «Меры предосторожности».***

### **Содержание:**

|  |    |
|--|----|
| Меры предосторожности .....                          | 3  |
| Наименование внешних частей кресла .....             | 7  |
| Наименование внутренних частей кресла .....          | 8  |
| Схема внутренних механизмов кресла .....             | 9  |
| Схема сборки кресла .....                            | 10 |
| Настройка кресла перед началом использования .....   | 15 |
| Использование пульта дистанционного управления ..... | 18 |
| Управление креслом; функции и возможности .....      | 23 |
| После массажа .....                                  | 25 |
| Чистка и уход за массажным креслом .....             | 26 |
| Возможные неполадки и их устранение .....            | 27 |
| Технические характеристики .....                     | 28 |

Пожалуйста, храните инструкцию в надежном месте для возможного обращения к ней в дальнейшем.

## Меры предосторожности

### Примечание:

Убедительная просьба внимательно прочитать инструкцию для правильной работы и управления массажным креслом!

|  |  |
|--|--|
|   | Этот знак обозначает: угроза для Вашего здоровья   |
|   | Этот знак обозначает: угроза повреждения кресла или других объектов                                    |
|   | Этот знак обозначает: запрещается совершать указанные действия   |
|   | Этот знак обозначает: следуйте указанной инструкции  |
|   | Этот знак обозначает: самостоятельная разборка кресла запрещена  |
|   | Этот знак обозначает: правильный способ подключения/отсоединения проводов; строго выполнять инструкцию |
|  | Этот знак означает: кабель работает правильно  |


|   |   |
|---|---|
|    | <p><b><u>Противопоказания</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Остеопороз</li> <li>• Болезни сердца, наличие с кардиостимулятора или других электронных приспособлений в организме</li> <li>• Беременность</li> <li>• Алкогольное опьянение</li> <li>• Люди со слабым здоровьем перед применением должны проконсультироваться со специалистом</li> <li>• <b><u>Внимание!</u></b> Не спите в массажном кресле</li> </ul>   |
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Перед использованием кресла проверьте, нет ли вокруг кресла детей, животных или других предметов</li> <li>• Если во время использования кресла вы почувствуете недомогание, остановите работу кресла и проконсультируйтесь с врачом</li> <li>• Будьте осторожны при массаже шейного отдела</li> <li>• Недееспособные или частично дееспособные люди не должны пользоваться креслом без контроля специалиста</li> </ul>   |
|   | <p><b><u>Запрещается</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Делать массаж головы</li> <li>• Делать массаж живота и коленей</li> <li>• Детям и животным играть на кресле, особенно во время массажа</li> <li>• Сидеть на спинке или подлокотниках</li> </ul>   |
|   | <p><b><u>Правила электротехнической безопасности</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Вставляйте вилку кресла только в исправные розетки</li> <li>• Убедитесь, что вилка полностью вставлена в розетку, во избежание короткого замыкания и для уменьшения риска возгорания</li> <li>• Выдерните вилку из розетки по окончании использования, нажмите кнопку вкл./выкл. перед тем, как вытащить вилку</li> <li>• Не используйте неисправные сетевой шнур, вилку и розетку</li> <li>• Во время массажа не используйте другие электрические приборы</li> <li>• В случае любых поломок или перекручивания шнура пользоваться креслом запрещается</li> </ul> |
|  | <p><b><u>Ремонт и разборка кресла</u></b></p> <p>Самостоятельный ремонт и разборка кресла запрещены!</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• В случае любой неисправности следует немедленно обратиться в сервисный центр или к авторизованному дилеру для устранения неполадки</li> <li>• Перед применением кресла проверьте наличие повреждений внешнего покрытия кресла. При обнаружении повреждений любого размера, немедленно обратитесь к специалисту</li> <li>• Храните массажные накидки в расправленном виде</li> </ul>   |

|   |   |
|---|---|
|    | <p><b><u>Внимание!</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Используйте кресло только в помещении</li> <li>• Кресло должно располагаться не менее чем в 40 см. от стены, что обеспечит пространство для раскладывания кресла</li> <li>• Максимальное предполагаемое время использования кресла – 20 мин: 5 минут на каждый вид массажа. Рекомендуется начинать с расслабляющего массажа. Длительное использование кресла в одном и том же режиме может стать причиной неприятных ощущений</li> <li>• Перед началом массажа убедитесь, что массажные головки находятся в правильном положении во избежание повреждений</li> <li>• Перед тем, как вставить вилку в розетку, убедитесь, что кнопка вкл./выкл. находится в положении выкл.</li> <li>• Убедитесь, что вилка полностью вставлена в розетку</li> <li>• Убедитесь, нет ли воды или посторонних предметов на сетевом шнуре</li> <li>• Установите провод в правильное положение.  Вилка должна быть вставлена в розетку с заземлением</li> </ul> |
|    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Не нажимайте руками, не наступайте на массажные головки</li> <li>• Не кладите руки между работающими массажными головками</li> <li>• Не кладите руки или ноги между механическими деталями</li> <li>• Не становитесь, не садитесь на спинку кресла, на подлокотники и подставку для ног</li> <li>• Не вставляйте на кресло во время массажа</li> <li>• Не передвигайте кресло во время массажа</li> <li>• Не выдергивайте вилку из розетки, не нажимайте кнопку вкл./выкл во время работы кресла</li> <li>• Не кладите руки или голову между частями подставки для ног, когда она находится в разложенном состоянии</li> <li>• Не используйте массажное кресло, если чувствуете головную боль или головокружение</li> <li>• Не садитесь и не давите на спинку, когда она находится в разложенном положении</li> <li>• Не используйте кресло без одежды. Это может стать причиной кожных раздражений.</li> </ul>  |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Держите кресло подальше от горячих, мокрых, острых предметов и едких, легко воспламеняющихся, взрывчатых веществ</li> <li>• Использовать шерстяные одеяла или другие теплые материалы на кресле не рекомендуется</li> <li>• Держите кресло подальше от печки и других опасных предметов</li> <li>• Не ставьте кресло на солнце или в любое другое место с высокой температурой</li> <li>• Не используйте кресло на улице</li> </ul>  |

|   |  |
|---|--|
|  | <ul style="list-style-type: none"><li>• Не используйте кресло во влажных помещениях рядом с бассейном или ванной комнатой</li><li>• Держите кресло и пульт дистанционного управления сухими все время</li><li>• Не используйте кресло, когда у вас влажное тело</li></ul>  |
|  | <ul style="list-style-type: none"><li>• Убедитесь, что правильно установили провод заземления (если вы не знаете, как правильно установить этот провод, обратитесь за помощью к профессиональному электрику)</li><li>• Не используйте штепсельную розетку (если вилка не подходит к розетке, не пытайтесь ее изменить самостоятельно. Вызовите профессионала для правильной установки)</li></ul>   |
|  | <ul style="list-style-type: none"><li>• Выдерните сетевой кабель перед чисткой кресла</li><li>• Выдерните сетевой кабель по окончании использования кресла</li><li>• Выдерните сетевой кабель при любых неполадках в сети</li><li>• Пожалуйста, выключите кнопку вкл./выкл. и выдерните шнур после окончания массажа</li><li>• Выдерните сетевой кабель немедленно, в случае отключения электричества</li></ul>  |
|  | <p><b><u>Предохранитель</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Если предохранитель перегорел, пожалуйста, выключите кресло и выдерните шнур. Откройте крышку, закрывающую предохранитель, который находится рядом с выключателем. Используйте предохранитель того же размера, чтобы заменить старый, затем закройте крышку. Вы можете обратиться к специалисту.</li><li>• Шнур заземления не должен находиться рядом с газовыми или водными трубами, а также рядом с телефонными проводами.</li></ul> |


## Наименование внешних частей кресла

1. Пульт дистанционного управления
2. Держатель пульта дистанционного управления
3. Правый подлокотник
4. Подушка сидения
5. Массажер для икроножных мышц
6. Массажер для ступней
7. Колесики
8. Левый подлокотник
9. Подушка под спину
10. Спинка кресла
11. Подушка под шею и голову
12. Пульт управления
13. Выключатель
14. Блок питания

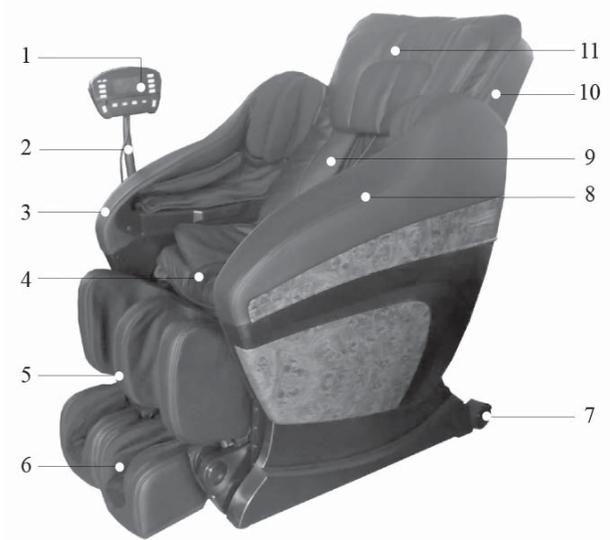


## Наименование внутренних частей кресла

1. Массажные ролики
2. Воздушные подушки в спинке кресла
3. Воздушные подушки в массажере для рук
4. Боковые воздушные подушки в сидении кресла
5. Передние воздушные подушки в сидении кресла
6. Воздушные подушки в массажере для икроножных мышц
7. Боковые воздушные подушки в массажере для ступней
8. Нижние воздушные подушки в массажере для ступней

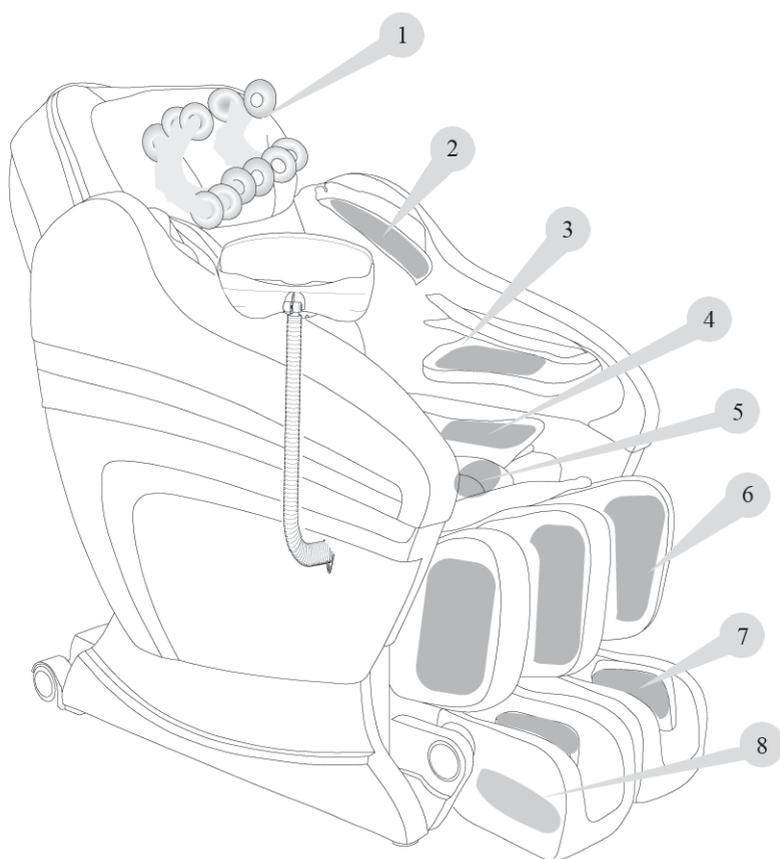

## Схема внутренних механизмов кресла

1. Левый подлокотник
2. Левая боковая панель
3. Подвижная опора левого подлокотника
4. Рама сиденья
5. Компрессор
6. Правая боковая панель
7. Подвижная опора правого подлокотника
8. Массажер для ног
9. Электрический привод сиденья
10. Электрический привод массажера для ног
11. Электрический привод спинки кресла
12. Правый подлокотник
13. Держатель пульта управления
14. Пульт управления
15. Подушка сиденья
16. Подушка под голову
17. Накладка на сиденье
18. Пластиковая конструкция спинки
19. Металлическая рама спинки кресла
20. Массажные ролики
21. Задняя крышка
22. Колесики
23. Блок питания
24. Защитная панель сиденья

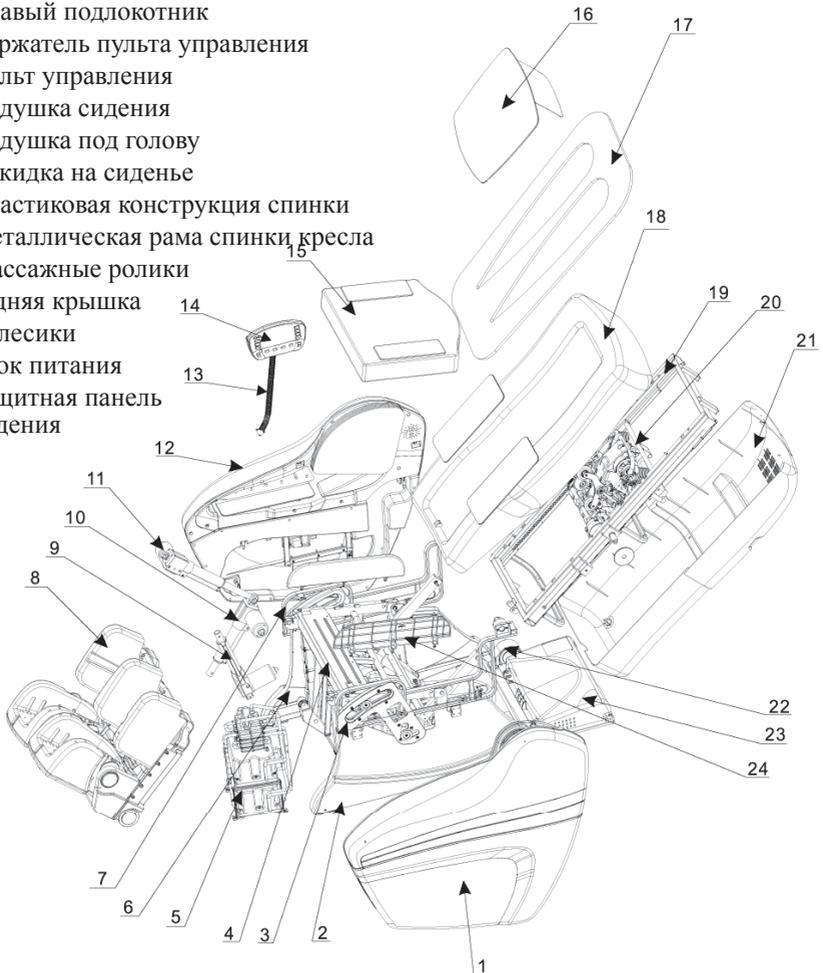

## Схема сборки кресла


### Сборка массажного кресла

#### Шаг первый:

- Вытащите кресло
- Осторожно возьмитесь за массажер для ног и за металлическую трубку на спинке кресла, потом вытащите основную часть кресла из коробки. Затем вытащите остальные детали: накидку, подушку, правый и левый подлокотники, пульт дистанционного управления, кабели и т. д. Понадобится 2 человека, чтобы достать кресло.



- Аккуратно вытащите две боковины из коробки.

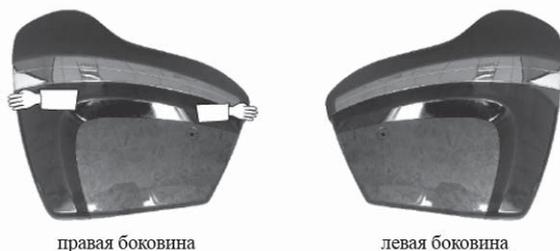


**Шаг второй:** Установка основной части кресла

- Поднимите спинку кресла и отклоните её на 120 градусов. Вы услышите характерный щелчок, это означает, что спинка встала в правильное положение. Далее при помощи прилагающегося болта соедините вращающуюся муфту подлокотника с металлическим держателем подлокотника (см. рисунок).


**Шаг третий:** Установка защитной панели сиденья

- Отодвиньте защитную панель сиденья и убедитесь, что гладкая её сторона направлена внутрь кресла. Вставьте цилиндры панели в соответствующие отверстия в металлической раме кресла.

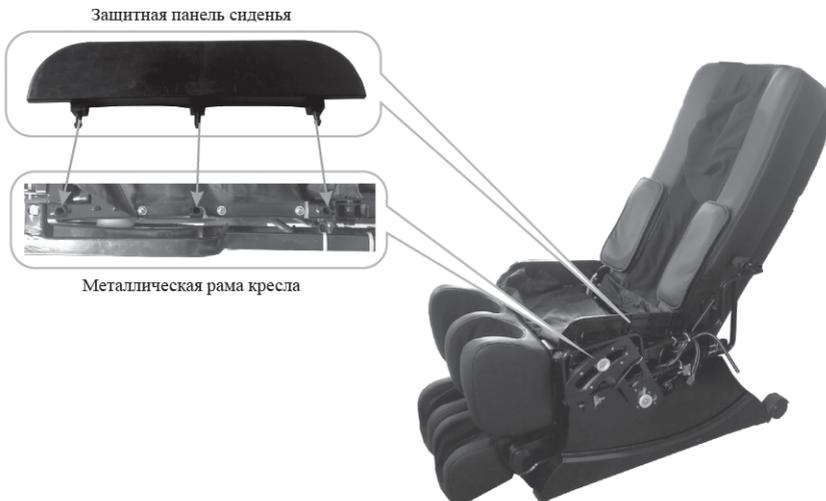


**Шаг четвертый:** Установка подлокотников

- Установите втулку, находящуюся в задней части подлокотников, в соответствующее отверстие движущейся рамы по месту.
- Соедините штуцер с трубкой в подлокотнике.
- Установите втулку, находящуюся в передней части подлокотников, в соответствующее отверстие движущейся рамы по месту.
- Придерживая подлокотник, толкните его внутрь. Характерный щелчок означает, что подлокотник установлен.
- Повторите все описанную выше процедуру для установки второго подлокотника.

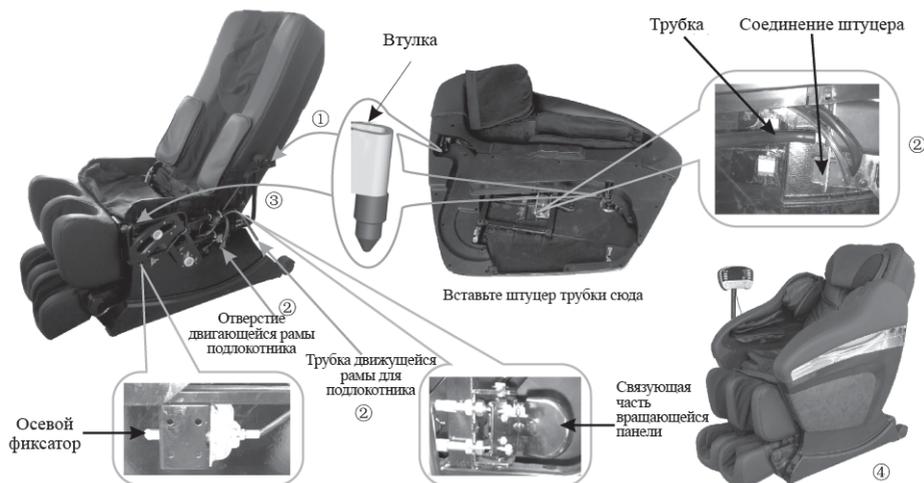

**Шаг пятый:** Установка пульта управления и его держателя:

- Прикрутите держатель для пульта управления к правому подлокотнику с помощью трех винтов (M5\*16) и трех шайб. Вставьте пульт в держатель.

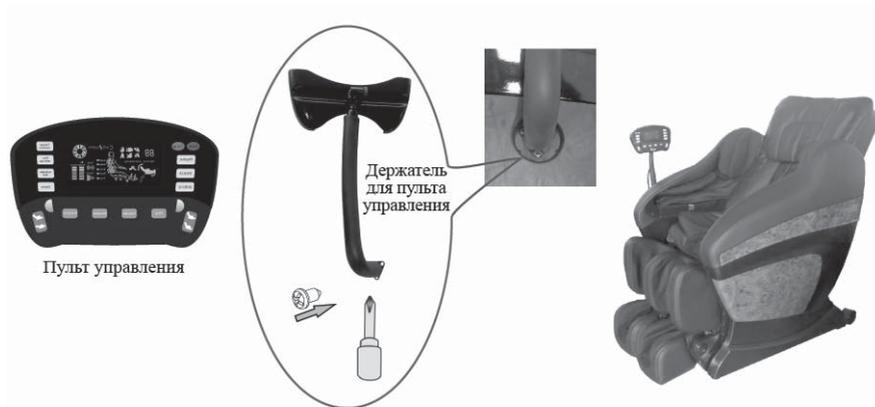

**Шаг шестой:** Соедините воздушные трубки сидения:

- Соедините воздушные трубки подушки для сиденья с воздушными трубками на кресле по цветам (черную с черной, красную с красной, серую с серой, коричневую с коричневой).



**Шаг седьмой:** Присоединение накидок под голову и спину

- Наденьте на кресло накидку под спину, а на нее накидку для головы.

**Совет:**

Проверьте, чтобы нижний край накидки под голову и нижний край Вашего уха (когда Вы сидите в кресле) были на одном уровне. Такое положение обеспечит наиболее точное сканирование Вашего тела и подбор оптимального массажа.



Накидка под спину




Накидка под голову



Прикрепите накидку под голову к спинке кресла при помощи липучки


Прикрепите накидку под спину к спинке кресла при помощи молнии

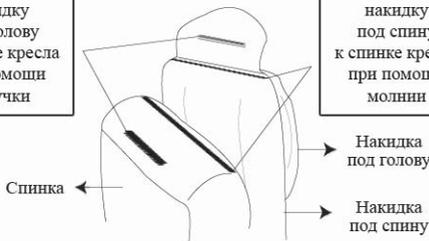

Установка массажного кресла завершена

**Шаг восьмой:** Окончание установки кресла

1. Подсоедините пульт управления и сетевой кабель в соответствующие разъемы блока питания внизу кресла (см. рисунок).
  - Разъем а предназначен для пульта управления
  - Разъем b предназначен для сетевого кабеля
  - Разъем d предназначен для наушников (см. рисунок)
  - Разъем e предназначен для USB диска
  - Разъем f предназначен для SD или MMC карт
2. Вставьте второй конец сетевого шнура в розетку
3. Включите выключатель (загорится свет)
4. С помощью пульта выберите подходящую массажную программу и наслаждайтесь массажем.

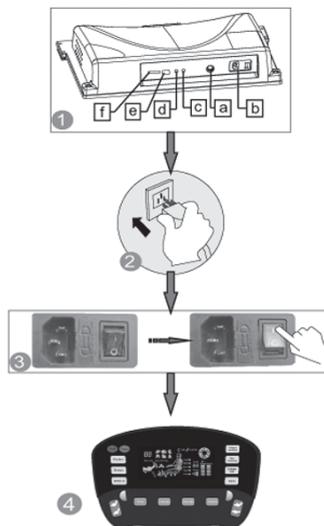

## Настройка кресла перед началом использования


Требования к помещению, в котором находится кресло

### Внимание!!!

- Не используйте кресло около бассейна, в ванной комнате или другом влажном помещении, во избежание возгорания и электрического удара
- Не ставьте кресло под прямые солнечные лучи и рядом с нагревательными приборами во избежание порчи обивочного покрытия
- Используйте кресло на ровной поверхности, чтобы избежать падения кресла и других неприятностей

### Проверьте пространство вокруг кресла:

Перед тем как разложить кресло, проверьте, нет ли вокруг него людей, животных или других предметов.

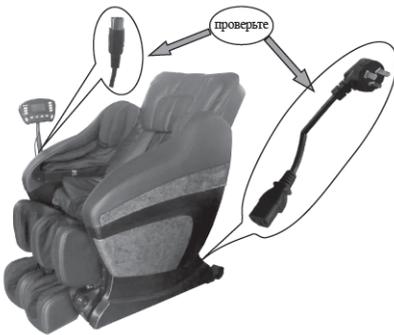

Проверьте сетевой кабель, вилку

- (1) Протрите пыль с вилки сухой тряпочкой
- (2) Не сгибайте, не перекручивайте, не растягивайте, не давите с силой на сетевой кабель

Минимальное расстояние от спинки кресла до стены - 40 см.



Размер свободного пространства, необходимого для использования кресла




Минимальное расстояние перед креслом - 40 см.

Проверьте окружающие предметы

Когда раскладываются спинка и ножной массажер кресла, убедитесь что:

- Сзади и спереди нет людей или предметов
- Расстояние до стен и других поверхностей не менее 40 см

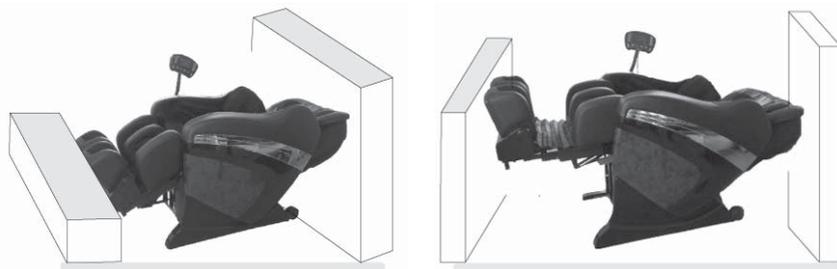

### **Как передвигать массажное кресло**

Не передвигайте кресло во время работы, во избежание травм и несчастных случаев.


#### **Как правильно передвигать кресло**

- Положите все провода на сидение кресла, чтобы не повредить их во время перемещения кресла
- Не передвигайте кресло на колесиках по деревянному полу и по любому другому легко повреждаемому материалу. Поднимите кресло силами 2-х и более человек.
- Не поднимайте кресло за подставку для ног. Это может привести к поломке кресла
- Убедитесь, что вилка выдернута из розетки и не касается пола



#### **Перемещение кресла**

1. Держась за опущенную подставку для ног, наклоните кресло, держась за спинку, до тех пор, пока его вес не придется на колесики. После этого толкайте кресло вперед до нужного места и осторожно опустите его.

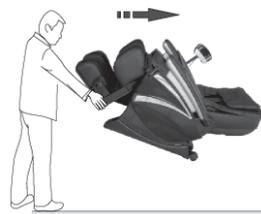

2. Два человека могут поднять кресло, держась за боковины, и перенести его до нужного места.

## Регулировка кресла перед применением

Перед регулировкой

1. Убедитесь, что массажные ролики находятся в правильном положении, только после этого садитесь.



2. Перед началом массажа ролики пройдутся вверх и вниз вдоль спины, определяя верхнюю и нижнюю точки массажа. Правильно определенная верхняя точка массажа обеспечит Вам по-настоящему комфортный массаж.



### **Важно:**


Если Вы чувствуете, что массаж недостаточно сильный, откиньте верхнюю подушку и/или накидку.




Т.к. кресло весит около 100 кг, оно может оставлять следы на напольном покрытии на одном месте. Мы рекомендуем подстелить коврик, чтобы избежать порчи Вашего пола.



## Использование пульта дистанционного управления

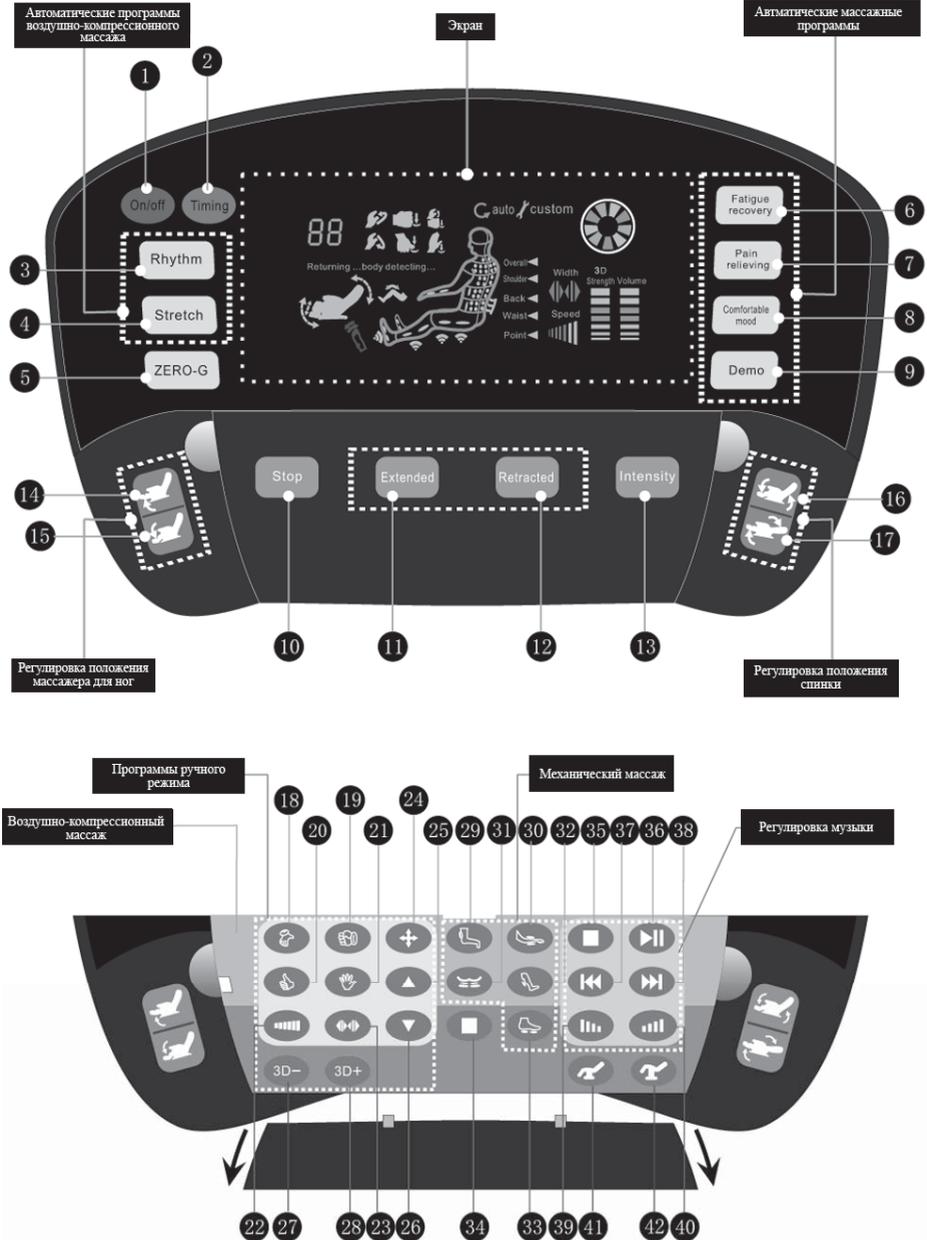


|  |  |
|--|--|
| <p>On/off</p> <p>Timing</p> <p>Rhythm</p> <p>Stretch</p> <p>ZERO-G</p> <p>Fatigue recovery</p> <p>Pain relieving</p> <p>Comfortable mood</p> <p>Demo</p> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Нажмите кнопку включения/выключения для включения или выключения кресла. Кресло начнет работу, но спинка не откинется. Вы можете выбрать любую программу ручного или автоматического массажа. После выбора массажа спинка кресла откинется, а ножной массажер поднимется вверх. После сканирования начнется выбранный массаж. Нажмите эту кнопку повторно, и кресло прекратит работу, а ролики вернется в исходное положение.</li> <li>2. Кнопка настройки времени. Время, установленное по умолчанию - 20 минут. Нажмите эту кнопку повторно – время сеанса увеличится до 30 минут; нажмите кнопку третий раз – время уменьшится до 15 минут.</li> <li>3. Функция ритм-массаж. Осуществляет массаж в ритме играющей музыки. В зависимости от проигрываемой музыки вы можете регулировать интенсивность массажа и его скорость. Нажмите на эту же кнопку повторно, чтобы отключить данную функцию.</li> <li>4. Нажмите кнопку Stretch для начала режима вытяжения. В данном режиме роликовый массаж спины комбинируется с воздушно-компрессионным. Нажмите данную кнопку повторно для отключения функции.</li> <li>5. Нажмите эту кнопку, что бы привести кресло в положение нулевой гравитации. Нажмите эту кнопку снова, чтобы принять исходное положение.</li> <li>6. Нажмите эту кнопку, чтобы начать автоматическую программу «Снятие усталости». Нажмите эту кнопку еще раз, что бы остановить программу.</li> <li>7. Нажмите эту кнопку, чтобы начать автоматическую программу «Облегчение боли». Нажмите эту кнопку еще раз, что бы остановить программу.</li> <li>8. Нажмите эту кнопку, чтобы начать автоматическую программу «Комфортный массаж». Нажмите эту кнопку еще раз, что бы остановить программу.</li> <li>9. Во время работы кресла нажмите эту кнопку, чтобы в течение 8 минут пройти демонстрационную программу и попробовать разные виды массажа.</li> </ol> |
| <p>Stop</p> <p>Extended</p> <p>Retracted</p> <p>Intensity</p>  | <ol style="list-style-type: none"> <li>10. Нажмите эту кнопку, чтобы остановить работу кресла.</li> <li>11. Нажмите и удерживайте эту кнопку, чтобы выдвинуть массажер для ног. Отпустите кнопку, чтобы зафиксировать выбранное положение.</li> <li>12. Нажмите и удерживайте эту кнопку, чтобы собрать массажер для ног. Отпустите кнопку, чтобы зафиксировать выбранное положение.</li> <li>13. Нажмите эту кнопку, чтобы настроить интенсивность воздушно-компрессионного массажа (активна при включенном воздушно-компрессионном массаже).</li> </ol>  |
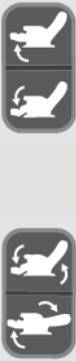
|  |  |
|--|--|
|   | <p>14. Нажмите и удерживайте эту кнопку: массажер для ног начнет подниматься вверх. Отпустите кнопку, чтобы зафиксировать массажер для ног в выбранном положении.</p> <p>15. Нажмите и удерживайте эту кнопку: массажер для ног начнет опускаться вниз. Отпустите кнопку, чтобы зафиксировать массажер для ног в выбранном положении.</p> <p>16. Нажмите и удерживайте эту кнопку: спинка кресла начнет подниматься вверх, а массажер для ног – опускаться вниз. Отпустите кнопку, чтобы зафиксировать спинку и массажер для ног в выбранном положении.</p> <p>17. Нажмите и удерживайте эту кнопку: спинка кресла начнет опускаться вниз, а массажер для ног – подниматься вверх. Отпустите кнопку, чтобы зафиксировать спинку и массажер для ног в выбранном положении.</p>  |
|  | <p>18. После включения кресла нажмите эту кнопку, чтобы начать разминающий массаж. При повторном нажатии массаж прекращается.</p> <p>19. После включения кресла нажмите эту кнопку, чтобы начать поколачивающий массаж. При повторном нажатии массаж прекращается.</p> <p>20. После включения кресла нажмите эту кнопку, чтобы начать надавливающий массаж. При повторном нажатии массаж прекращается.</p> <p>21. После включения кресла нажмите эту кнопку, чтобы начать постукивающий массаж. При повторном нажатии массаж прекращается.</p> <p>22. В ручном режиме во время разминающего, поколачивающего, надавливающего или смешанного массажа нажмите эту кнопку, чтобы отрегулировать скорость работы роликов. Всего доступны 3 уровня скорости.</p> <p>23. В ручном режиме во время поколачивающего, надавливающего, постукивающего или смешанного массажа нажмите эту кнопку, чтобы отрегулировать ширину расположения роликов.</p> <p>24. После включения кресла нажмите эту кнопку, чтобы выбрать зону массажа (например, плечи, спину, поясницу и т.д.)</p> <p>25. После включения кресла нажмите эту кнопку, чтобы передвинуть ролики вверх.</p> <p>26. После включения кресла нажмите эту кнопку, чтобы передвинуть ролики вниз.</p> <p>27. В ручном режиме нажмите эту кнопку, чтобы задвинуть массажные ролики.</p> <p>28. В ручном режиме нажмите эту кнопку, чтобы выдвинуть массажные ролики.</p> |

|  |  |
|--|--|
|        | <p>29. После включения кресла нажмите эту кнопку, чтобы начать воздушно-компрессионный массаж поясницы. При повторном нажатии массаж прекращается.</p> <p>30. После включения кресла нажмите эту кнопку, чтобы начать воздушно-компрессионный массаж рук. При повторном нажатии массаж прекращается.</p> <p>31. После включения кресла нажмите эту кнопку, чтобы начать воздушно-компрессионный массаж ягодиц. При повторном нажатии массаж прекращается.</p> <p>32. После включения кресла нажмите эту кнопку, чтобы начать воздушно-компрессионный массаж икроножных мышц. При повторном нажатии массаж прекращается.</p> <p>33. После включения кресла нажмите эту кнопку, чтобы начать воздушно-компрессионный массаж ступней. При повторном нажатии массаж прекращается.</p> <p>34. Нажмите эту кнопку, чтобы быстро остановить массаж.</p>                                 |
|         | <p>35. Когда кресло включено, нажмите данную кнопку, чтобы остановить музыку.</p> <p>36. Когда кресло включено, нажмите данную кнопку, чтобы запустить музыку. Нажмите кнопку повторно, чтобы поставить музыку на паузу.</p> <p>37. Когда кресло включено, нажмите данную кнопку, чтобы проиграть предыдущую композицию.</p> <p>38. Когда кресло включено, нажмите данную кнопку, чтобы проиграть следующую композицию.</p> <p>39. Когда кресло включено, нажмите данную кнопку, чтобы уменьшить громкость.</p> <p>40. Когда кресло включено, нажмите данную кнопку, чтобы увеличить громкость.</p> <p>41. Нажмите и удерживайте эту кнопку, чтобы опустить сиденье кресла. Отпустите кнопку, чтобы зафиксировать выбранное положение.</p> <p>42. Нажмите и удерживайте эту кнопку, чтобы поднять сиденье кресла. Отпустите кнопку, чтобы зафиксировать выбранное положение.</p> |

## Виды массажа

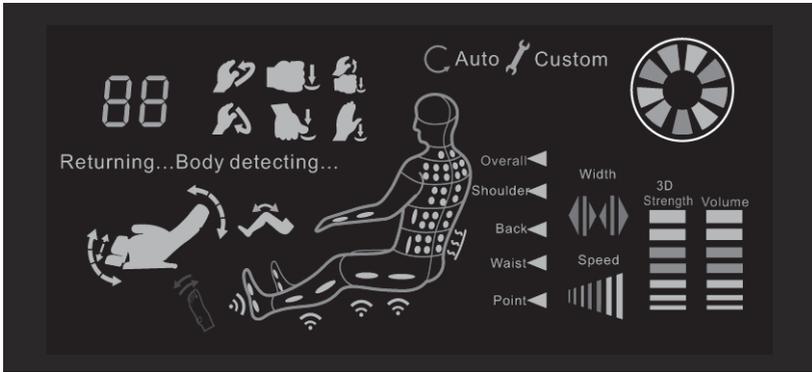

Виды массажа

- разминающий
- поколачивающий
- надавливающий
- постукивающий

Auto — автоматический режим  
 Custom — ручной режим

В автоматическом режиме появляются оранжевые, зеленые и голубые полоски.

ширина  
 Изменение ширины расположения роликов

Изменение интенсивности массажа

Раскладывание \ складывание спинки кресла

Раскладывание \ складывание массажера для ног

**Возвращение в исходное состояние.**  
Если время массажа закончено, кресло возвращается в исходное состояние.

**Сканирование тела.**  
Перед началом массажа кресло сканирует Вашего тело и определяет верхнюю и нижнюю точки массажа.

**Вытяжение массажера для ног.**

Зоны воздушно-компрессионного массажа

Зоны роликового массажа

Интенсивность воздушно-компрессионного массажа

Функция разработки стопы

Массаж всего тела

Массаж плеч

Массаж спины

Массаж поясницы


Массаж определенной точки

## Управление креслом; функции и возможности

### Включение/Выключение кресла

Шаг первый: Включите кресло

1. Разъем А предназначен для вилки пульта дистанционного управления
2. Разъем В предназначен для шнура питания
3. Вставьте сетевой шнур в розетку
4. Нажмите выключатель, который находится на задней стороне кресла. Затем нажмите кнопку Включить/Выключить на пульте управления. Если в течение 2 минут Вы не нажмете кнопку Включить/Выключить на пульте управления, кресло перейдет в спящий режим.

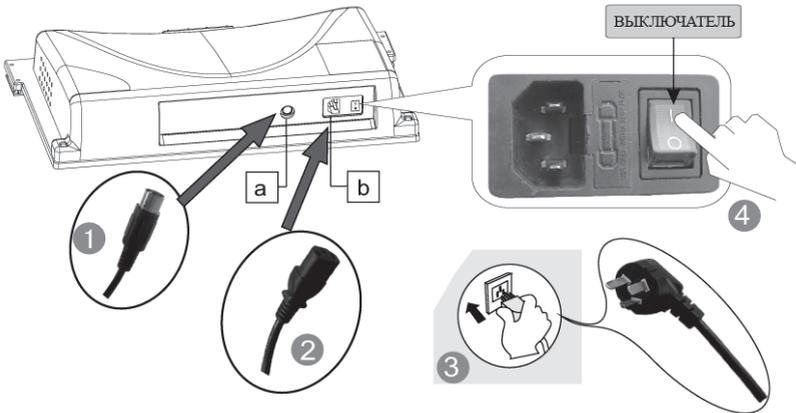

Шаг второй: Массаж

Выберите программу массажа на пульте дистанционного управления. Все программы описаны в разделе «Как использовать пульт дистанционного управления».


Как только время массажа закончится, кресло закончит свою работу, и если в течение 2 минут не будет нажато никакой кнопки, оно перейдет в спящий режим.



Шаг третий: Отключение питания

1. Нажмите кнопку вкл/выкл на пульте дистанционного управления, чтобы выключить кресло

2. После восстановления нажмите кнопку выключения сзади кресла
3. Выдерните вилку из розетки

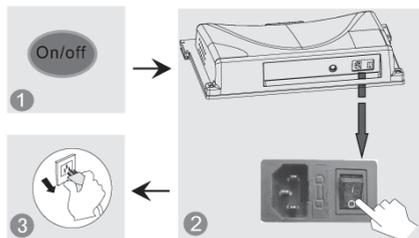

### **Меры предосторожности**

Перед использованием кресла приподнимите накидку, чтобы убедиться, что нет повреждений тканевого покрытия. Если таковые имеются, то следует немедленно отключить кресло и связаться с профессионалом.

### **Внимание!!!**

1. Перед началом массажа убедитесь, что кресло стоит правильно
2. Не вставайте с кресла во время работы

### **Инструкции:**

#### Как разложить спинку кресла

Нажмите и удерживайте эту кнопку: спинка кресла начнет опускаться вниз, а массажер для ног – подниматься вверх. Отпустите кнопку, чтобы зафиксировать спинку и массажер для ног в выбранном положении.



#### Как поднять спинку кресла

Нажмите и удерживайте эту кнопку: спинка кресла начнет подниматься вверх, а массажер для ног – опускаться вниз. Отпустите кнопку, чтобы зафиксировать спинку и массажер для ног в выбранном положении.



#### Как поднять подставку для ног

Нажмите и удерживайте эту кнопку: массажер для ног начнет подниматься вверх. Отпустите кнопку, чтобы зафиксировать массажер для ног в выбранном положении.



#### Как опустить подставку для ног

Нажмите и удерживайте эту кнопку: массажер для ног начнет опускаться вниз. Отпустите кнопку, чтобы зафиксировать массажер для ног в выбранном положении.



### Как удлинить массажер для ног

(Размер массажера для ног увеличивается на 21 см.)

Теперь Вы можете отрегулировать массажер для ног в соответствии с вашим ростом.



### Воздушно-компрессионный массаж рук

Поместите руки внутрь массажера для плеч и рук до того, как воздушные подушки наполнятся воздухом. Затем нажмите кнопку  и наслаждайтесь массажем.

### Функция разработки голеностопного сустава

Секция массажера для ступней наклоняется вверх и вниз на 30 градусов. Это позволяет хорошо прорабатывать голеностопные суставы.



### Мягкий массаж и массаж 3D массаж

Откройте крышку на пульте дистанционного управления, чтобы выбрать область массажа, интенсивность и амплитуду.

Нажмите 3D+ или 3D-, чтобы увеличить или уменьшить интенсивность массажа.

**Внимание!** Убедитесь, что во время раскладывания кресла поблизости нет людей, животных и других предметов.

## После массажа

### Приведение массажного кресла в исходное состояние

1. Убедитесь, что во время сборки кресла поблизости нет людей, животных и других предметов



2. Верните кресло в исходное состояние с помощью кнопок сбора спинки и ножного массажера на пульте управления. Затем нажмите кнопку Вкл./Выкл. (или сразу же нажмите кнопку Вкл./Выкл.)

3. После возвращения кресла в исходное состояние поставьте пульт управления в держатель для пульта

4. Если Вы убирали накидку под голову и накидку под спину, прикрепите их обратно на кресло.



5. Переключите выключатель внизу кресла

6. Выдерните вилку из розетки

### Внимание:

Когда вы выдергиваете вилку из розетки, держитесь за саму вилку – как показано на рисунке, а не за провод.



7. Протрите кресло

## Чистка и уход за креслом

### Части из медицинского кож. зама

#### Обычная чистка

1. Используйте сухую, мягкую тряпочку для чистки
2. Не используйте химические, медицинские чистящие средства для чистки кресла



#### При сильных загрязнениях

1. Мягкую тряпочку окуните в слабый (3-5%) раствор моющего средства и слегка протрите кресло
2. Смойте остатки чистящего средства чистой влажной тряпкой.



3. Протрите кресло сухой тряпкой
4. Дайте креслу высохнуть естественным путем

**Части из пластмассы**

1. Мягкую тряпочку окуните в слабый (3-5%) раствор моющего средства и слегка протрите кресло
2. Смойте остатки чистящего средства чистой влажной тряпкой.
3. Протрите кресло сухой тряпкой
4. Дайте креслу высохнуть естественным путем

**Пульт управления**

1. Протрите пульт управления влажной хорошо отжатой тряпкой
2. Дайте высохнуть естественным путем
3. Не используйте спиртосодержащие очистители

**Общие советы**

- Выдерните вилку из розетки перед чисткой, не дотрагивайтесь мокрыми руками до сетевого шнура
- После чистки высушите руки, если хотите воткнуть вилку в розетку
- Строго следуйте инструкции, что бы избежать электрического удара или возгорания

**Возможные неполадки и их устранение**

| Проблемы                                      | Возможные причины  | Методы решения проблемы  |
|---|--|--|
| Массажное кресло не работает после включения. | Сетевой кабель не подключен к электросети.   | Вставьте вилку в розетку.  |
|   | Кресло выключено.  | Включите кресло.   |
|   | Массирующие ролики в процессе поднятия в базовое положение.  | Не пользуйтесь креслом до остановки массирующих роликов в базовом положении.                               |
|   | Розетка или вилка сломаны.   | Обратитесь к производителю, официальному дилеру или квалифицированному мастеру для замены вилки и розетки. |
|   | Перегорел предохранитель.  | Свяжитесь с указанным ремонтно-сервисным центром для осуществления технического обслуживания.              |
|   | Проблемы во внутреннем аварийном цикле самоконтроля.   | Свяжитесь с указанным ремонтно-сервисным центром для осуществления технического обслуживания.              |
| Перегрев пульта дистанционного управления.    | Если после длительного пользования креслом пульт слегка нагрелся — это нормально. Если же он слишком горячий — это не нормально. | Свяжитесь с указанным ремонтно-сервисным центром для осуществления технического обслуживания.              |

|  |  |  |
|--|--|--|
| <p>Массажный механизм не двигается вверх/вниз. На дисплее пульта дистанционного управления мигает E1.</p>                | <p>Перезагрузка массажного механизма вызывает срабатывание внутренней системы самозащиты.</p>  | <p>Уменьшите давление на массажный механизм, выключите кресло из сети и включите снова через 10 секунд.</p>  |
|  | <p>Поломка внутренней массажной системы, срабатывание аварийной системы самозащиты.</p>  | <p>Свяжитесь с указанным ремонтно-сервисным центром для осуществления технического обслуживания.</p>   |
|  | <p>Повреждена ткань, прокручивание или блокировка роликов во время опускания/подъема, срабатывание аварийной системы самозащиты.</p> | <p>Свяжитесь с указанным ремонтно-сервисным центром для осуществления технического обслуживания.</p>   |
| <p>Массажный механизм находится в верхней или нижней позиции. На дисплее пульта дистанционного управления мигает E6.</p> | <p>Массажный механизм находится в верхней или нижней позиции. На дисплее пульта дистанционного управления мигает E6.</p>             | <p>Свяжитесь с указанным ремонтно-сервисным центром для осуществления замены концевого выключателя.</p>  |
| <p>Не работает функция растирающего массажа, в это время мигает E2.</p>  | <p>Проблемы с мотором растирающего массажа или проблемы аварийного цикла самосохранения.</p>   | <p>Свяжитесь с указанным ремонтно-сервисным центром для осуществления замены концевого выключателя.</p>  |
| <p>Не работает функция растирающего массажа, в это время мигает E3.</p>  | <p>Проблемы с мотором растирающего массажа или проблемы аварийного цикла самосохранения.</p>   | <p>Свяжитесь с указанным ремонтно-сервисным центром для осуществления замены концевого выключателя.</p>  |
| <p>Шум во время работы кресла значительно усилился.</p>  | <p>Длительный период работы кресла может быть причиной истирания механизмов.</p>   | <p>Свяжитесь с указанным ремонтно-сервисным центром для осуществления технического обслуживания.</p>   |
| <p>Сетевой кабель или вилка слишком горячие.</p>   | <p>Кресло работает слишком долго.</p>  | <p>Выдерните вилку из розетки и дайте креслу остыть в течение 30 минут. После этого включите снова. Если вилка снова быстро нагрелась – обратитесь в сервисный центр для оказания ремонта.</p> |

## Технические характеристики

| Массажное кресло uDream | Характеристики   |
|-------------------------|--|
| Артикул                 | RestArt RK-7802  |
| Напряжение, В           | 220  |
| Мощность, Вт            | 280  |
| Вес нетто, кг           | Основная часть 108/122,4;<br>Подлокотники 25,4/32        |
| Размер упаковки, мм     | Основная часть 1385*770*880<br>Подлокотники 1060*470*940 |